


Kit lab iradiator tipe garis sinar ultraviolet LKUVL-115



Iradiasi UV itu mudah!

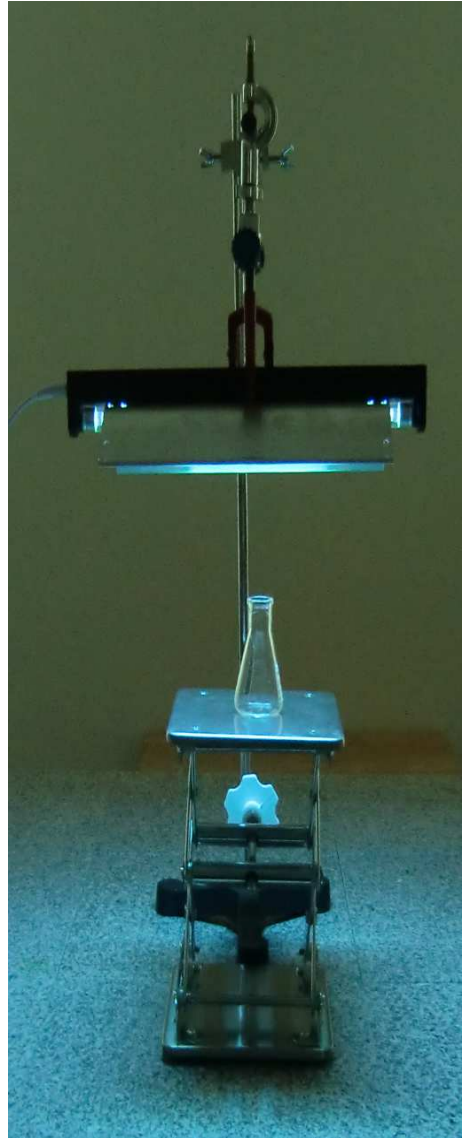

◆ Feature ◆

- 1). Karena ini adalah kit, pengguna dapat dengan mudah menggunakan perangkat penyinaran UV.
- 2). Karena memiliki amplifier internal, pengoperasian pencahayaan menjadi mudah.
- 3). Menyinari 253,7nm, yang memiliki efek sterilisasi tinggi, dengan output tinggi 8W.
- 4). Platform pengangkat manual memudahkan untuk mengubah dan menyesuaikan diameter iradiasi.


Heat-tech

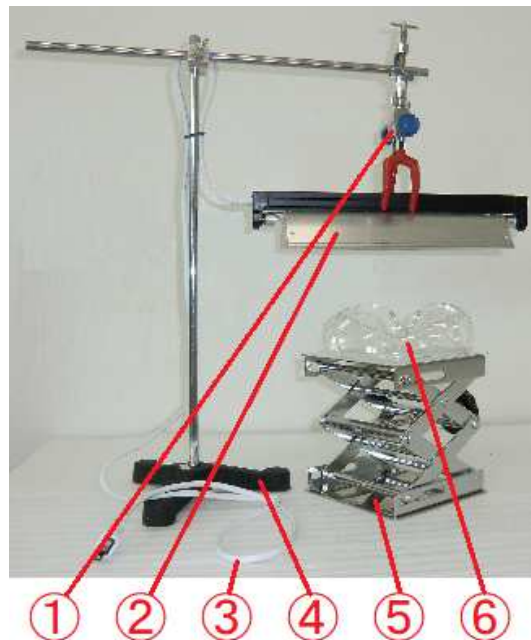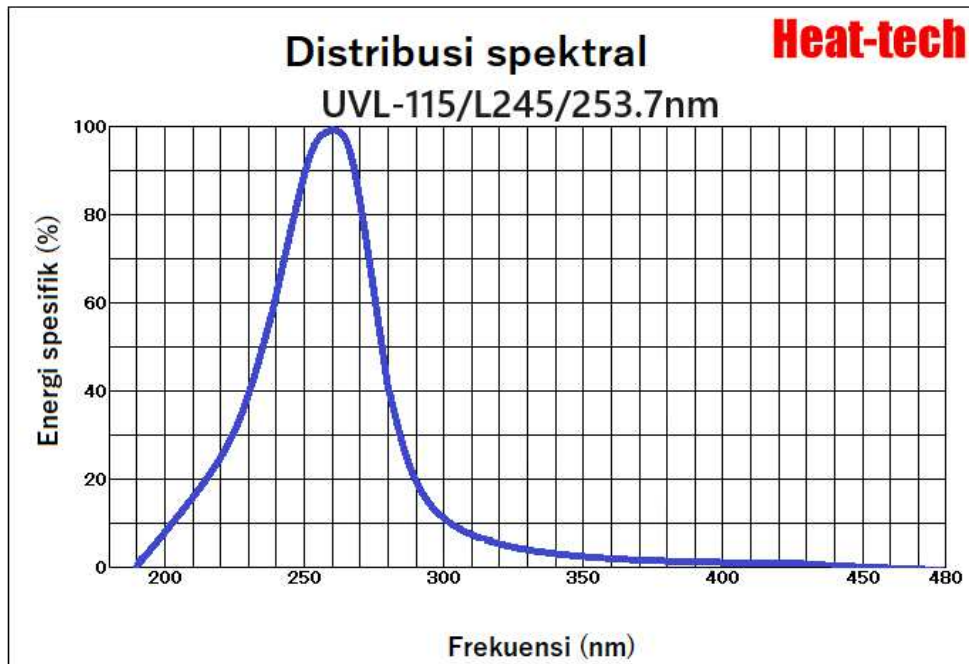

Contoh perakitan kit lab

(* Kit lab dikirimkan sebagai bagian individual.)

- ① Penjepit berputar terbuka ganda untuk memasang perangkat iradiasi Menyinari di sudut mana pun.
- ② Perangkat iradiasi linier ultraviolet UVL-115/L245/253.7nm-8w Karena memiliki amplifier bawaan, pengoperasiannya mudah. Reflektor besar mencegah penyebaran sinar UV.
- ③ Kabel listrik AC220V 1,5m
- ④ Pangkalan tempat uji
- ⑤ Angkat manual
Basis adalah 100mm x 100mm, tinggi awal 54mm, tinggi maksimum 134mm, tinggi variabel 80mm. 80mm dinaikkan dan diturunkan dengan kenop 16 putaran, sehingga akurasi 0,5mm dapat diperoleh.
- ⑥ Kacamata pelindung sinar ultraviolet.
Titik iradiasi dapat dikonfirmasi dengan aman secara visual.

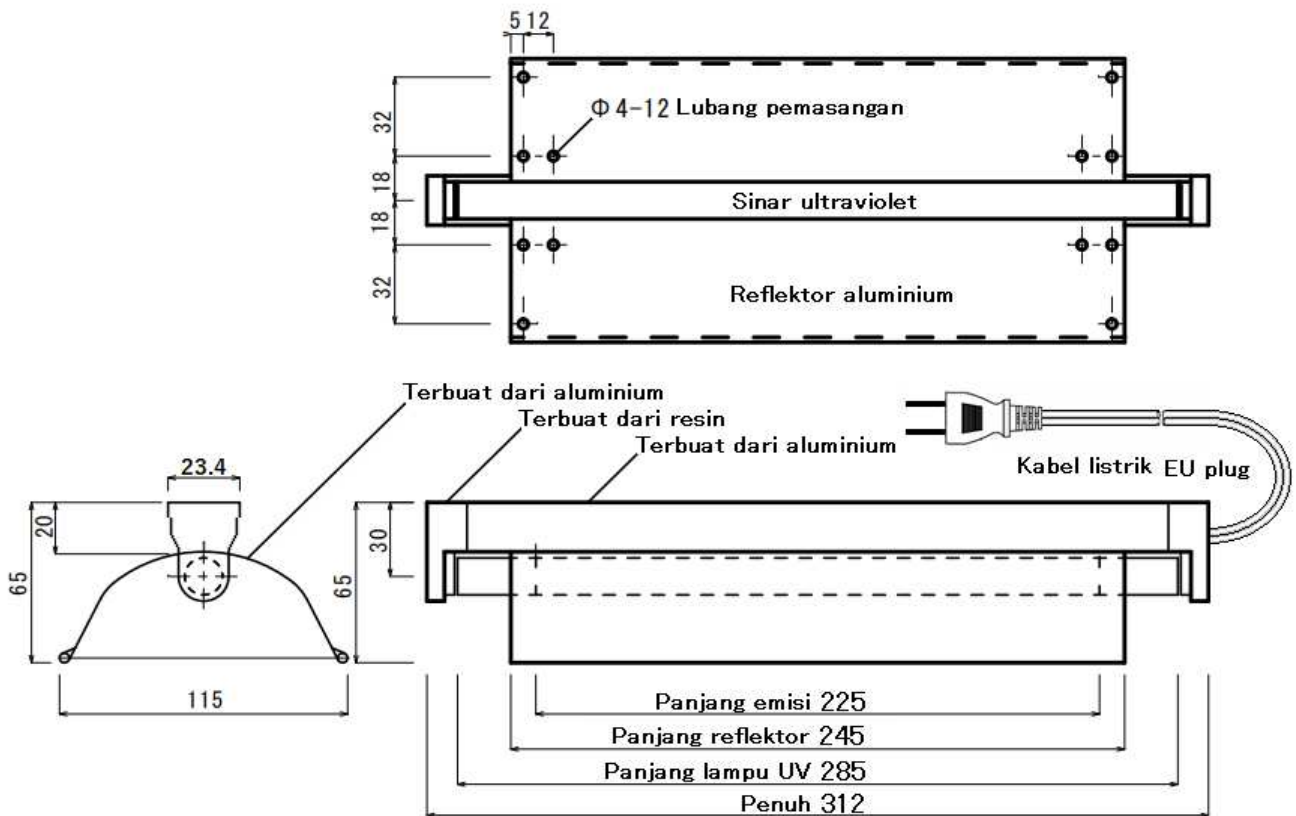

[Catatan]

- ① Sinar ultraviolet berbahaya bagi mata. Pastikan untuk memakai kacamata pengaman saat bekerja.
- ② Saat suhu dalam ruangan menurun, keluaran UV menurun.
- ③ Mesin ini adalah mesin presisi. Jangan sampai terkena getaran.
- ④ Dua belas lubang pemasangan dibor pada reflektor.

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Panjang cermin L | 245mm |
| Tegangan catu daya v | AC220V |
| Tenaga listrik w | 8W |
| Frekuensi tengah | 253.7nm |
| Model | UVL-115/100v-8w/L245/253.7nm |
| Nama Produk | Iradiator linier sinar ultraviolet |

| | | |
|---------|------------|---------------------------|
| Tanggal | 2022/10/21 | Heat-tech Co.,Ltd. |
|---------|------------|---------------------------|

Pemanasan berkecepatan tinggi non-kontak

Heat-tech

Heat-tech Co., Ltd.

<https://idn.heat-tech.biz/>

International Medical Device Alliance IMDA

1-6-5 Minatojima Minamimachi Chuo-ku Kobe 650-0047 Japan

TEL 81-78945-7894 FAX 81-78945-7895

E-mail info@heat-tech.biz